



BEDTIME
HEALTHCARE

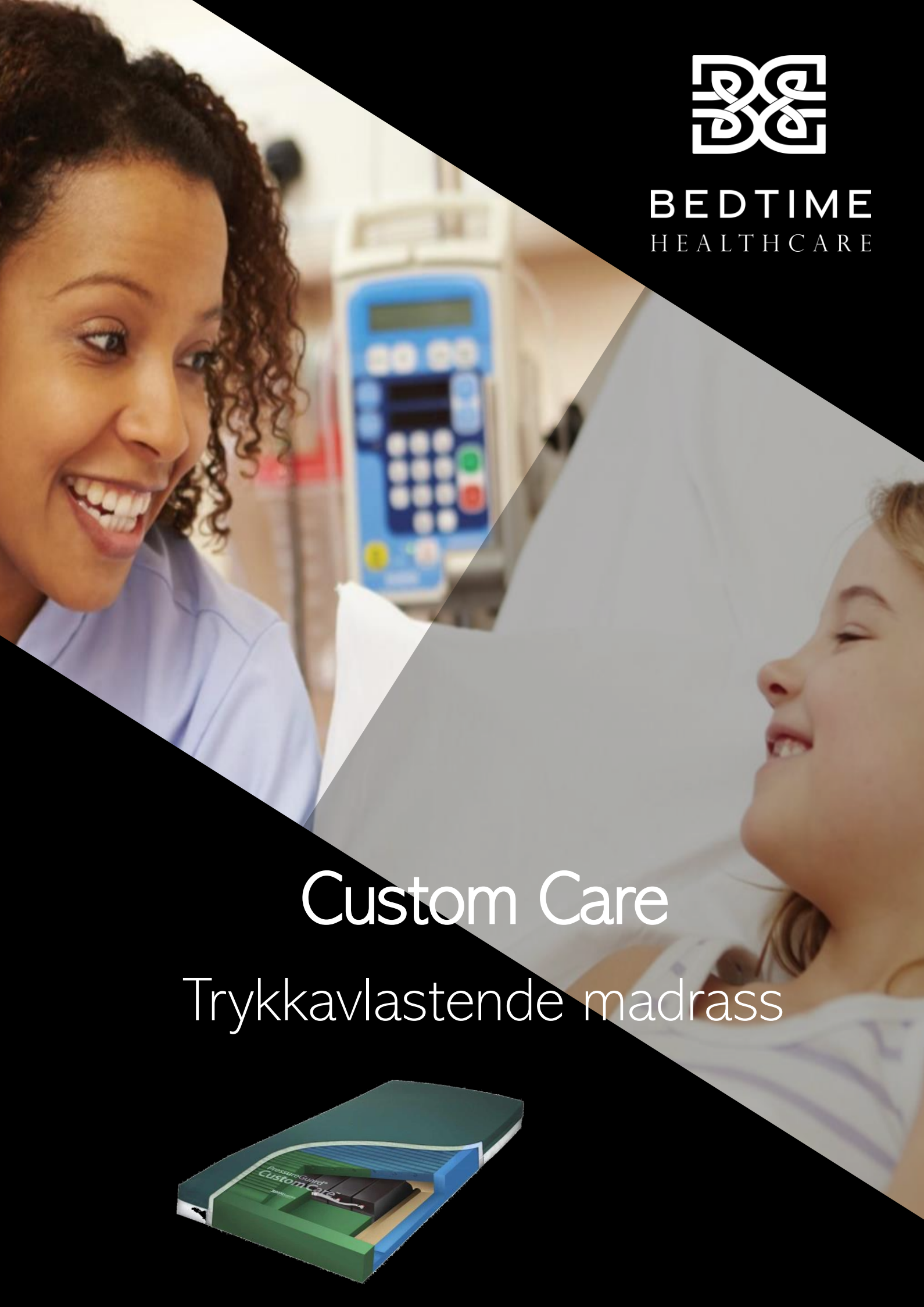

Custom Care

Trykkavlastende madrass

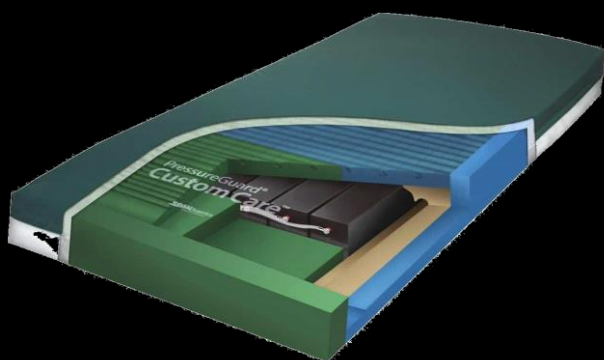


Custom Care

Reaktiv trykkfordelende luftmadrass

PressureGuard®
Custom Care®


Custom Care®madrassen er basert på en lang rekke innovasjoner – og betyr forbedret behandling for de du bryr deg om. Trekkets forbedrede funksjoner inkluderer den unike designen til det antimikrobielle stretch-trekket laget med det overlegne LifeSpan®-stoffet.

LifeSpan® er ekstremt slitesterk og rengjørbar og gir enestående motstand mot kjemisk nedbrytning forårsaket av blekemiddel og andre sterke desinfeksjonsmidler med sitt polykarbonat-forsterkede belegg.

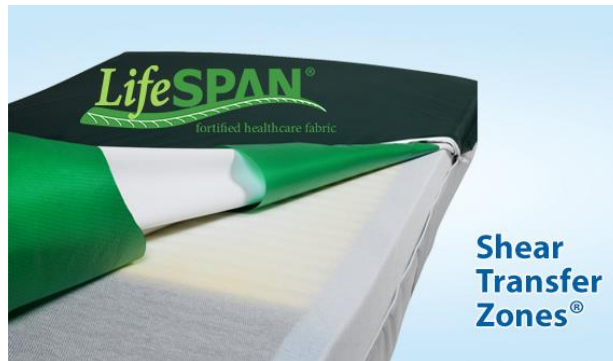

Custom Care® gir effektiv trykkfordeling gjennom sin enestående kombinasjon av et soneinndelte og friksjonsreducerende skumskall som omgir et reaktivt luftkammersystem.

Custom Cares unike Metered Immersion™-design reagerer på endringer i overflatebelastning gjennom en serie sammenkoblede langsgående luftceller. Når brukeren beveger seg eller repositionerer seg på overflaten, reagerer kamrene under i samspill - avbøyer, overfører luft og ventilerer - i forhold til brukerens vekt og posisjonering. Resultatet er en blanding av trykkfordeling, friksjonsreduksjon, komfort og enkel betjening som ikke er mulig å oppnå med andre pumpeløse systemer.

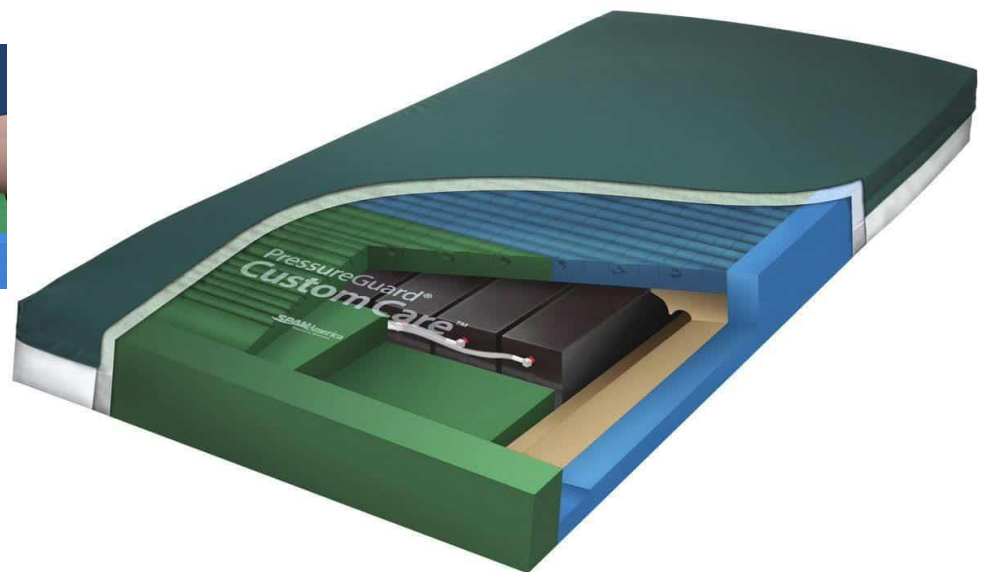

Bedtime AS

www.bedtimehealthcare.no

Healthcare@bedtime.no

(+47) 67 11 10 80



DNGaselle

