


BEDTIME
HEALTHCARE




Mendo Medic II

Trykkfordelende overmadrass

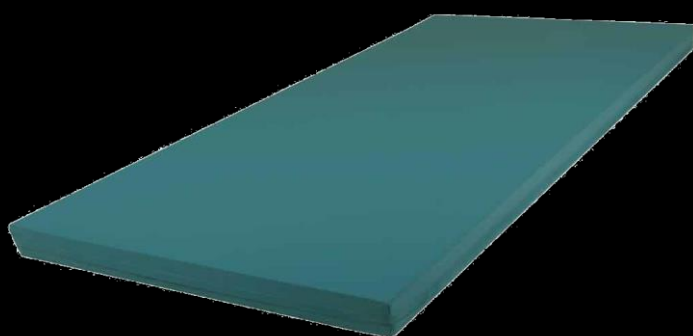

Mendo Medic II overmadrass

En trykkfordelende overmadrass av høy kvalitet. Overmadrassen er norskprodusert med en kjerne av viskoelastisk skum. Det viskoelastiske skummet påvirkes av kroppstemperaturen, og former seg etter kroppen. Dette gjør at brukeren synker ned i madrassen slik at trykket fordeler seg over en større flate. Mendo Medic overmadrass er trykkfordelingstestet, og testet for lang holdbarhet med meget gode resultater. Overmadrassen gir en god liggekomfort.

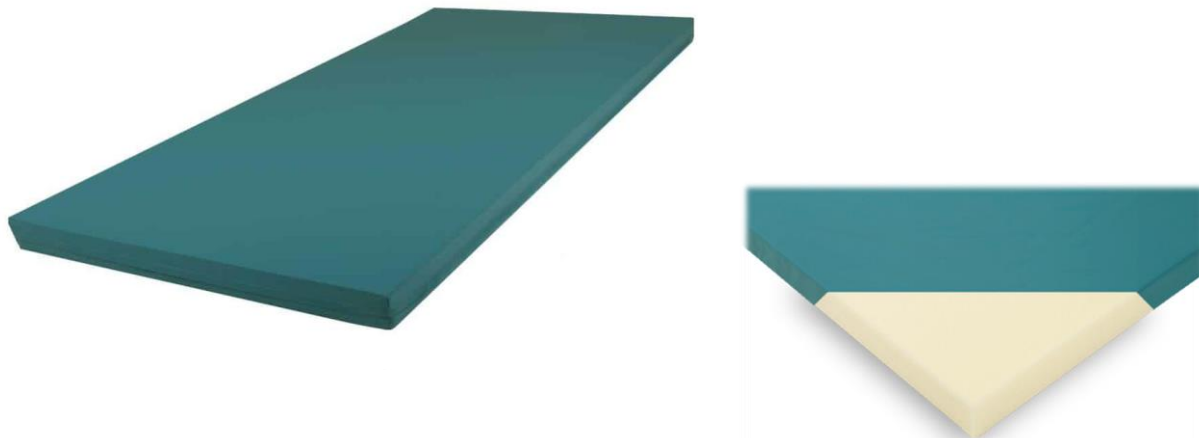

Tekniske data:

Mendo Medic overmadrass leveres i 7,5 cm tykkelse for brukere opp til 200 kg.

Kjernen er branntestet mot kravene i NS-EN 597-1 og -2, samt 1021-1

Skumplasten er produsert etter miljøkravene i Certipur.

Medicaretrekk: Inkontinenstrekk med glidelås i 3 sider og leppe.

Prisforhandlende størrelser:

75x190 cm, 75x200 cm, 80x180 cm, 85x180 cm, 85x200 cm, 85x220 cm, 90x200 cm, 90x210 cm, 90x220 cm, 120x200 cm, 120x210 cm og 120x220 cm.

Spesialmål tilgjengelig.

Bedtime AS

www.bedtimehealthcare.no

Healthcare@bedtime.no

(+47) 67 11 10 80

