


BEDTIME  
HEALTHCARE



# ProCell V

## Dynamisk madrass

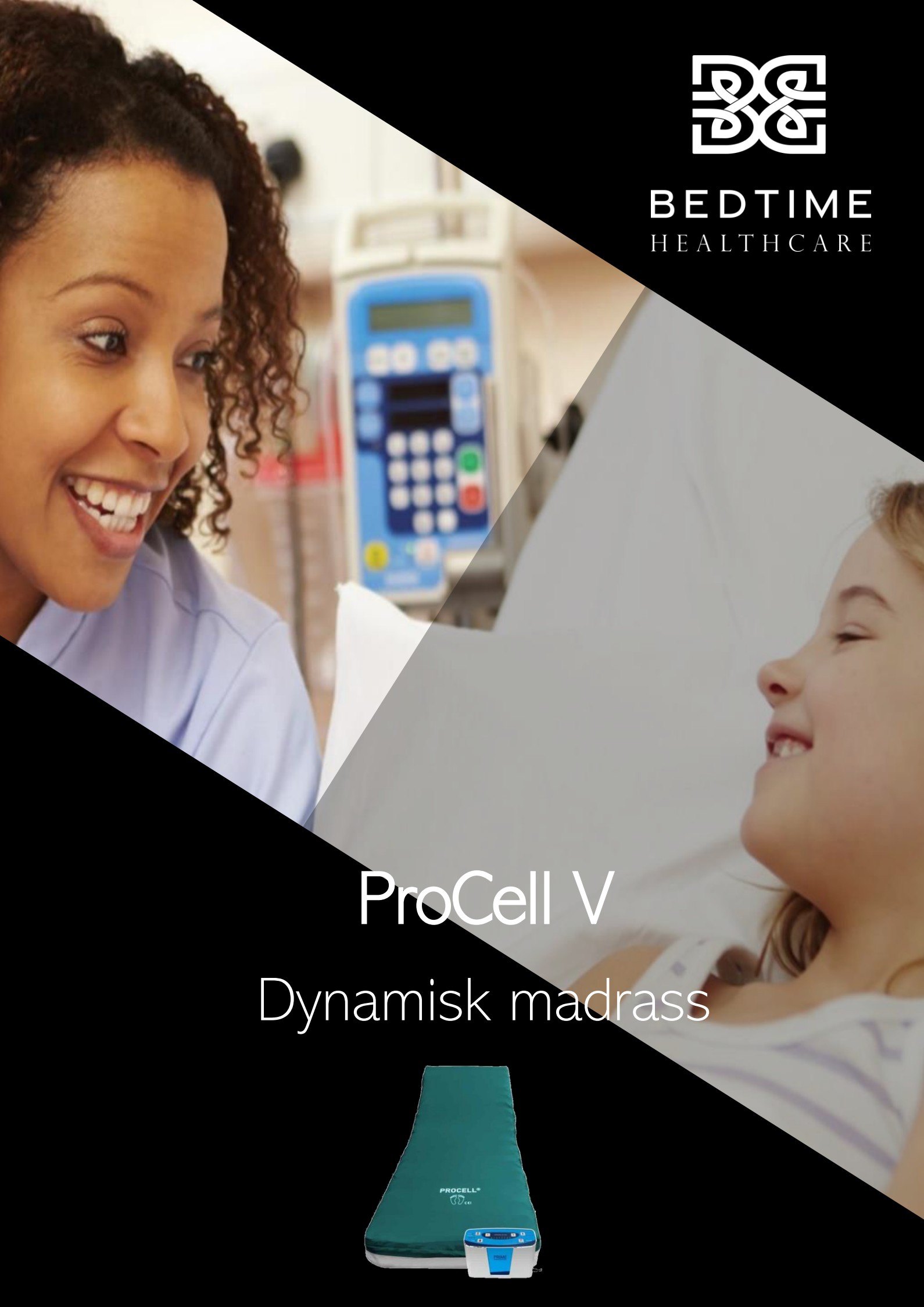

# Procell V

ProCell V-systemet tilbyr en helautomatisk digital pumpe med autolås for sikkerhet og en madrass med luftceller. For å lage flytende hæler, kan disse cellene kobles fra for null trykk i dette sensitive området.

For optimal komfort veksler madrassen 1 av 3 celler, noe som gir bedre pasientstøtte under behandlingen og reduserer generelt overflatetrykk. Aktivisering av Autofirm Mode gir en stabil støtteoverflate for pleieprosedyrer eller for å lette forflytninger inn eller ut av sengen. Audiovisuelle alarmer beskytter trykk-

nivåene i systemet og rapporterer når pumpeservice skal utføres. I både statisk og alternerende

modus vil pumpen merke når brukeren legges på madrassen og vil utføre en autoinnstilling av komforttrykket og beregne på nytt ved repositionering. Når det er nødvendig for å møte individuelle behov, kan en manuell modus også aktiveres.



## Målgruppe

Procell V kan brukes på brukere i alle risikogrupper og behandler trykksår opp til og med grad 4.

## Produktspesifikasjoner

Madrass: Dynamisk

Størrelser: 85x200

90x200

90x210 cm

Høyde: 20cm

Pasientvekt: 200 kg maks.

Total vekt: 15 kg

Pumpe: 230V / 50Hz

Støy: 0-26dB

Syklus: 16,5 min.

## Sikkerhetsstandarder

Er i overensstemmelse med: MDR (EU) 2017/745

IEC60601-1: 2005 / EN60601-1: 2006

Beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse II, type BF

Beskyttelse av inntrengning av væsker: IPx21

Driftsmåte: Kontinuerlige

## Bedtime AS

[www.bedtimehealthcare.no](http://www.bedtimehealthcare.no)

[Healthcare@bedtime.no](mailto:Healthcare@bedtime.no)

(+47) 67 11 10 80

